

MIGEL



ترازوی
فردی
GPS 802

English ☐

فارسی ☐

■ درباره ترازو

این دستگاه یک ترازوی فردی هوشمند با سنسور کشش سنج با دقت بالا می باشد و به شما کمک می کند که با استفاده از اطلاعاتی که در گوشی هوشمندتان ثبت می شود ، همیشه از شرایط وزنی خود مطلع باشید ، این ترازو با استفاده از فناوری بلوتوث قادر به انتقال اطلاعات وزن شما به گوشی هوشمندتان می باشد ، به این صورت که نتایج وزن شما را به شکل یک نمودار در اپلیکیشن نشان می دهد . جهت استفاده از بلوتوث دستگاه ، اپلیکیشن را در گوشی خود دانلود کنید . این اولین قدم جهت کنترل وزن خواهد بود .

■ استفاده و مراقبت از دستگاه

۱- ترازو را در محیط مرطوب و خیلی گرم قرار ندهید (آن را در محدوده دمایی ۳۵-۵ درجه نگه داری کنید .

۲- روی ترازو ثابت بایستید به طوری که از قرار داشتن پاهایتان (بصورت برهنه) روی الکترودها مطمئن شوید ، در صورتی که روی لبه ی ترازو بایستید باعث افتادن شما خواهد شد .

۳- از وارد کردن ضربه ، تکان دادن و انداختن دستگاه خودداری کنید .

۴- ترازو را تمیز نگه داشته و از شستشوی آن با مواد اسیدی خودداری کنید .

۵- از استفاده دستگاه روی سطوح با لرزش شدید اجتناب کنید .

۶- برای مطمئن بودن از نتایج صحیح لطفا در ساعتی معین در روز وزن کشی را انجام دهید .

۷- سنجش چربی بدن برای سنین زیر ۱۰ سال و بالای ۱۰۰ سال انجام نمی شود .


۸- هنگامی که باتری ضعیف یا تمام می شود جهت جلوگیری از هر گونه فاسد شدگی در باتری ، آن را از دستگاه خارج کنید زیرا باعث زنگ زدگی بدنه ترازو می شود .

۹- استفاده از عملکرد سنجش حجم چربی ترازو برای دستگاه های تنظیم ضربان قلب و دیگر دستگاه های پزشکی توصیه نمی شود .

■ ۱ - دانلود و راه اندازی اپلیکیشن

الف) جهت دانلود اپلیکیشن مربوط به دستگاه وارد App Store یا Google Play شده و عبارت "Moving Life" جستجو و سپس آن را دانلود نمایید.

ب) همچنین می توانید با اسکن کردن کد QR که در پایین مشاهده می کنید اپلیکیشن مربوطه را دریافت کنید .

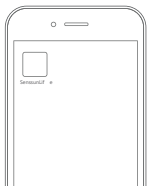

Moving Life

۱. مطابقت گوشی با اپلیکیشن


- اپل: iOS 7.0 و یا بالاتر
- اندروید: Android 4.3 و یا بالاتر
- نسخه بلوتوث ۴ و یا بالاتر

– با استفاده از فناوری نسخه ۴ بلوتوث نیازی به تطبیق دادن (PAIR) گوشی و ترازو نبوده و اتصال گوشی و دستگاه به صورت اتوماتیک انجام شده که فضای بین ۵ تا ۱۰ متر را تحت پوشش قرار می دهد.

این اپلیکیشن برای تبلت ها بهینه سازی نشده است.


۲. تعویض باتری

درپوش باتری را که در پشت ترازو قرار دارد باز کنید (همانند تصویر زیر) ، سپس باتری ها را باتوجه به قطب (+ -) در محفظه قرار دهید .

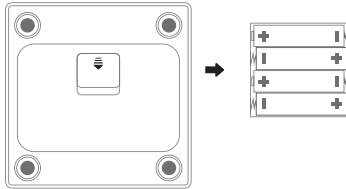

۳. تغییر واحد وزن

جهت تغییر واحد اندازه گیری وزن از دکمه ای که در زیر دستگاه تعبیه شده است استفاده کنید ، تغییر واحد وزن در صفحه نمایش نمایان می شود .

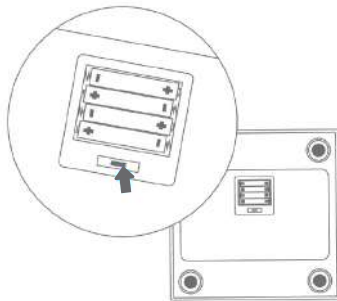


۴. اتصال دستگاه با گوشی

ابتدا بلوتوث گوشی را روشن کرده سپس وارد اپلیکیشن شوید . حساب کاربری (ACCOUNT) خود را ایجاد کنید و جهت راه اندازی پروفایل و وصل شدن به دستگاه موارد ذکر شده را به ترتیب انجام دهید .

قبل از وصل شدن به دستگاه آن را روشن کنید

تمام اندازه گیری های انجام شده توسط دستگاه در قسمت تاریخچه استفاده (HISTORY) اپلیکیشن ذخیره می شود ، بنابراین شما می توانید در هر زمان و هر مکان که هستید با استفاده از حساب کاربری خود آن ها را بازدید کنید .

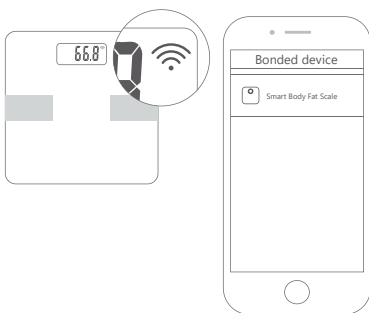

علامت های وضعیت اتصال




در صورت عدم اتصال ، علامت **BLUETOOTH** یا **WIFI** بصورت چشمک زن خواهد بود .

در صورت اتصال ، علامت **BLUETOOTH** یا **WIFI** بصورت ثابت روشن خواهد بود .

۵. شروع وزن کشی

جهت انجام اولین وزن کشی ابتدا ترازو و اپلیکیشن را از طریق **BLUETOOTH** به هم وصل کنید ، در مرحله بعدی دستگاه را روی یک سطح محکم و صاف قرار دهید و سپس روی ترازو بایستید . هنگامی که وزن در صفحه نمایش ثابت شد و بصورت چشمک زن در آمد دستگاه به اندازه گیری مقدار چربی بدن می پردازد و بعد از چند مرتبه نمایش آن ، ترازو بصورت خودکار خاموش خواهد شد .

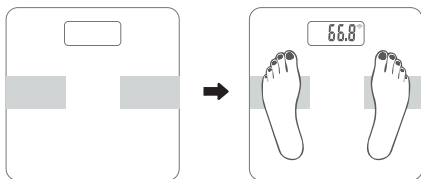

- از قرار دادن دستگاه روی فرش و سطوح نرم خودداری کنید .


- اولین وزن کشی می بایست با اتصال بلوتوث انجام شود زیرا اطلاعات وزن کاربر ثبت شده و در استفاده های بعدی ، دستگاه بصورت اتوماتیک کاربر را تشخیص خواهد داد . جهت اندازه گیری حجم چربی بدن ، با پاهای برهنه روی الکترودهای دستگاه بایستید .

سطح ترازو می بایست خشک و تمیز باشد .

- در صورتی که خواستید اطلاعات وزن کشی و اندازه گیری های مربوط به خود را بازدید کنید ، اپلیکیشن را باز کرده و قسمت **detain interface** را بررسی نمایید .

■ پشتیبانی از چند کاربر

این دستگاه قادر به پشتیبانی از ۸ کاربر می باشد .

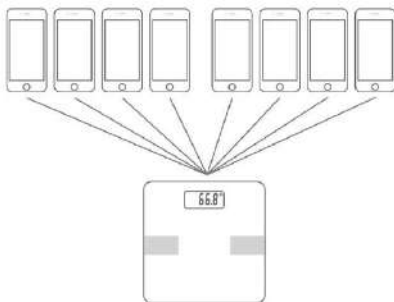

■ نشانگرهای هشدار دهنده

نشان دهنده اندازه گیری حجم چربی



حجم چربی در حال اندازه گیری می باشد ، لطفا در این هنگام از ترازو پایین نیایید و از اینکه پاهایتان (بصورت برهنه) روی الکترودهای دستگاه قرار دارد مطمئن شوید .

نشانگر درصد چربی بسیار پایین



درصد چربی بسیار پایین می باشد و پیشنهاد می گردد رژیم غذایی خود را با بیشتر کردن تغذیه تغییر داده و از خودتان مراقبت به عمل آورید .

نشانگر درصد چربی بالا



درصد چربی بسیار بالا می باشد ، رژیم غذایی خود را کنترل کنید و همچنین بیشتر ورزش کنید .

راه اندازی مجدد



وزن کشی دقیق صورت نگرفته آن را
مجددا انجام دهید

وزن کشی بیش از حد مجاز صورت
گرفته



جهت جلوگیری از آسیب به دستگاه
در صورت مشاهده این هشدار از ترازو
پایین بیایید .

نشانگر باتری ضعیف



باتری ضعیف است ، آن را با یک باتری
جدید تعویض کنید .

مشتري گرامي،

شرکت بازرگانی سنجه کیش (سهامی خاص) در راستای رفاه حال خریداران محترم و به پاس اعتمادی که به این مجموعه داشته‌اند، محصولات برقی خود را تحت پوشش ضمانت ۲۴ ماهه کاملاً رایگان، شامل: تعویض قطعات، همراه با ارائه کلیه خدمات مربوطه و همچنین تأمین قطعات به مدت ۱۰ سال از تاریخ خرید، قرار داده است.

خواهشمند است هنگام خرید کالا موارد زیر را به دقت مطالعه فرمایید:

۱. خواهشمند است هنگام تحویل کالا، اطمینان حاصل نمایید که کالا از لحاظ ظاهری کاملاً سالم است و کسری لوازم ندارد. هرگونه شکستگی و عیوب ظاهری و کسری قطعات پس از تحویل، شامل خدمات مندرج در ضمانت نامه نخواهد شد.

۲. لطفاً پیش از استفاده‌ی کالا، دفترچه‌ی راهنما را به دقت مطالعه نمایید. دستورالعمل‌های ذکرشده و هشدارهای موجود در دفترچه‌ی راهنما، کاربر را در رابطه با نوسانات برق، اتصالات نامناسب، عیب‌یابی و ... آگاه نموده و همچنین نحوه‌ی صحیح نصب دستگاه و قطعات را آموزش می‌دهد (مراکز فروشگاهی و خدماتی ما، آماده‌ی ارائه‌ی آموزش کاربری رایگان به تمامی مشتریان گرامی هستند). برای دریافت دفترچه‌های محصولات به وبگاه www.sanjehkish.com مراجعه نمایید.

۳. لطفاً توجه شود که ایرادات ناشی از عدم رعایت هشدارها و توصیه‌های ذکرشده در دفترچه‌ی راهنما مانند استفاده از آب یا درجه‌ی سختی بالا، نادرده‌گرفتن برچسب‌های هشداردهنده و هر نوع استفاده‌ی صنعتی و/یا غیرخانگی که موجب بروز ایرادات فنی در دستگاه گردد، شامل مزایای ضمانت‌نامه نمی‌گردد.

۴. در طول دوره‌ی ضمانت، هزینه‌ی تعمیرات و نصب قطعات یدکی رایگان بوده ولی قطعات مصرفی مانند انواع فیلترها، پاکت‌ها، لوازم جانبی و .. شامل ضمانت رایگان نخواهند بود.

Sanjeh

شرکت بازرگانی
سنجه کیش

سال خدمات پس از فروش

www.sanjehkish.com

www.2328.ir • info@2328.ir



مراکز خدمات پس از فروش:

تلفن: ۰۲۱-۲۳۲۸

دورنگار: ۰۲۱-۲۳۹۰۴۵۲۸

تلفن: ۰۲۱۲۲۶۳۵۵۸-۹

• تهران، خیابان شریعتی، پایین تر از پل رومی، شماره ۱۷۸

تلفن: ۰۲۱۷۷۹۰۵۱۱۵

• تهران، پایین تر از میدان هفت حوض، نرسیده به چهارراه تلفن خاتمه، پلاک ۳۲۹

MIGEL

ضمانت نامه
.....GUARANTY CARD.....

مشخصات کالا

• نام کالا: ترازوی فردی

• مدل: GPS 802

• شماره سریال ساخت:

• تاریخ خرید:

• مهر و امضای فروشگاه:

Sanjeh

شرکت بازرگانی
سنجه کیش

• سال خدمات پس از فروش

www.sanjehkish.com

www.2328.ir • info@2328.ir



مراکز خدمات پس از فروش:

تلفن: ۰۲۱-۲۳۲۸

دورنگار: ۰۲۱-۲۲۹۰۴۵۲۸

تلفن: ۰۲۱۲۳۳۵۵۸-۹

• تهران، خیابان شریعتی، پایین تر از پل رومی، شماره ۱۷۸

تلفن: ۰۲۱۷۷۹۰۵۱۱۵

• تهران، پایین تر از میدان هفت حوض، ترسیده به چهارراه تلفن خاله، پلاک ۴۲۹

Sanjeh

شرکت بازرگانی سنجه کیش

خدمات پس از فروش از طریق پست در سراسر کشور

با شماره تلفن: ۰۲۱-۲۳۲۸ تماس حاصل فرمایید.



واحد امور مشتریان توضیحات نحوه‌ی خدمات پستی
را ارائه خواهند داد.



کالای خود را به مامور پست تحویل دهید.



کالای شما در خدمات پس از فروش مرکزی توسط
تکنسین مجرب تعمیر خواهد شد.



کالای تعمیر شده، بازبینی و بسته‌بندی خواهد شد.



کالا در اسرع وقت توسط مامور پست درب منزل
شما، تحویل داده خواهد شد.



MIGEL



☒ English

☒ فارسی

Personal
Scale
GPS 802