



ترازوی فردی

PS 501

باتری


نوع باتری این ترازو یکی از این دو مدل است

الف. یک باتری سه ولتی لیتیومی CR۲۰۳۲. قبل از استفاده، ورقه‌ی جداکننده را بردارید.

ب. ۲ باتری ۱/۵ ولتی (نیم قلم). قبل از استفاده فویل بسته بندی جدا کنید.

تعویض باتری

حالت اول: پوشش باتری که در پشت ترازو قرار دارد را باز کنید. اگر نوع باتری شبیه به نمونه‌ی تصویر ۱ است،

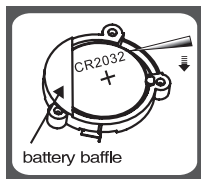


PIC 1

الف. با کمک شیئی نوک تیز باتری مستعمل را طبق شکل ایرون بیاورید.

ب. باتری نو را با گذاشتن یک طرف آن زیر صفحه‌ی نگهدارنده‌ی باتری و فشار دادن طرف دیگر باتری در دستگاه قرار دهید. به قطب صحیح قراگیری توجه کنید.

حالت دوم: پوشش باتری که در پشت باتری قرار دارد را باز کنید. اگر نوع باتری شبیه به نمونه‌ی تصویر ۲ است،

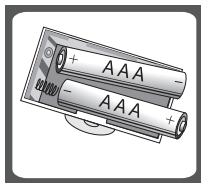


PIC 2

الف. با کمک شیئی نوک تیز باتری مستعمل را بیرون بیاورید.

ب. باتری نور را با گذاشتن یک طرف آن زیر صفحه‌ی نگهدارنده‌ی باتری و فشار دادن طرف دیگر باتری در دستگاه قرار دهید. به قطب صحیح قرارگیری توجه کنید.

■ صفحه‌ی نمایش

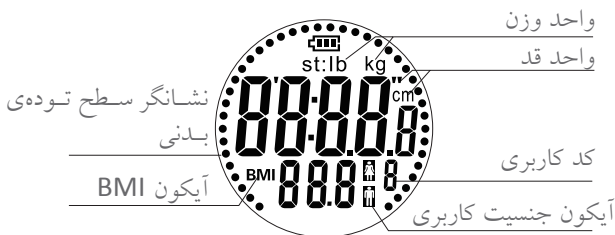

■ نشانه‌ی کلیدها

۱. Guest: وارد شدن به "حالت تنظیم برای میهمان"؛ زمانی که دستگاه خاموش است، یا عدد صفر را نشان می‌دهد، این کلید را فشار دهید.

۲. Set: زمانی که دستگاه خاموش است، یا عدد صفر را نشان می‌دهد، برای تنظیم پارامترهای کاربری از جمله کد کاربری، جنسیت و قد این کلید را فشار دهید. وقتی دستگاه عدد صفر را نشان می‌دهد، برای تبدیل واحد این دکمه را فشار داده و کمی نگهدارید.


۳. ▲: با هر بار فشار این دکمه به اندازه یک فاصله، مقدار

را اضافه کنید. فشار دادن و نگه داشتن ممتد این دکمه، سرعت افزایش مقدار را افزایش می‌دهد.

۴. ▼: با هر بار فشار این دکمه به اندازه‌ی یک فاصله، مقدار را کم کنید. فشار دادن و نگه داشتن ممتد این دکمه، سرعت کاهش مقدار را افزایش می‌دهد.

■ وزن کشی


وزن‌کشی اتوماتیک با ایستادن بر روی ترازو: برای روشن شدن دستگاه، شیئی با وزن بیش از ۳ کیلوگرم روی ترازو قرار دهید. سپس ترازو شروع به وزن‌کشی می‌کند و وزن نهایی را نشان می‌دهد. بعد از ثابت شدن وزن، ارقام روی نمایشگر ۳ بار چشمک می‌زند و ترازو به طور اتوماتیک اطلاعات ذخیره شده‌ی کاربر را جستجو می‌کند. اگر تفاوت وزن فعلی با وزن ذخیره شده در حافظه کمتر از ۵ کیلوگرم باشد، دستگاه به طور اتوماتیک شاخص توده‌ی بدنی را بر اساس اطلاعات ذخیره شده محاسبه می‌کند. اگر بیش از یک نفر کاربر که اطلاعاتشان در حافظه ذخیره شده، شاخص توده‌ی بدنی مشابه داشته باشند، کد کاربری چشمک می‌زند و شما می‌توانید کد کاربری خودتان را انتخاب کنید. اگر اقدامی صورت نگیرد، دستگاه در حالت وزن‌کشی قرار می‌گیرد و پس از ۱۰ ثانیه به طور اتوماتیک خاموش می‌شود.

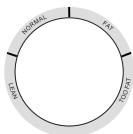

روی ترازو
بایستید



ذخیره
اطلاعات

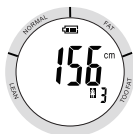

ترازو را روی سطحی
صاف قرار دهید


وزن نشان داده می شود و
۳ بار چشمک می زند.

اطلاعات کاربر
را نشان می دهد



دکمه‌ی ▲ یا ▼ را
برای انتخاب کد
کاربری فشار دهید.
برای تأیید دکمه‌ی
SET را فشار دهید

اطلاعات را ذخیره
نمی کند

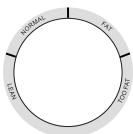

خاموش شدن اتوماتیک

BMI نشان داده
می شود

بعد از ثابت شده ارقام روی صفحه‌ی نمایش، وزن‌کشی‌های
بیشتر را میتوان انجام داد. مطمئن شوید که هر بار اضافی که
روی ترازو قرار می گیرد باید بیش از ۲ کیلوگرم باشد تا ترازو
بتواند وزن آن را محاسبه کند.

مثال: اگر می‌خواهید وزن نوزاد خود را بدانید، می‌توانید ابتدا خودتان روی ترازو بروید سپس بدون پایین آمدن از ترازو، کودک را با خود، روی ترازو نگهدارید. سپس وزن کلی بدست می‌آید. با تفریق کردن وزن خود از وزن کلی، وزن نوزاد شما به دست می‌آید.

■ حالت BMI


پارامترهای کاربری می‌توانند در دامنه‌های زیر تنظیم شوند.

کد کاربری	جنسیت	قد
۱-۸	مرد/ زن	۲۵۰-۱۰۰ سانتی‌متر (۸/۲-۳/۳ فوت)

۱) حالت BMI برای کاربر (به طور اتوماتیک اطلاعات را ذخیره می‌کند)

برای تنظیم پارامترهای کاربری: دکمه‌ی SET را فشار دهید. ترتیب تنظیمات به صورت کد کاربری (۱-۸)، جنسیت و قد است. دکمه‌ی SET را دوباره فشار دهید تا داده‌ها ذخیره شوند. بعد از پایان تنظیمات، به آرامی بر روی ترازو فشار وارد کنید. پارامترها ذخیره می‌شوند و دستگاه در حالت وزن‌کشی قرار می‌گیرد. روی ترازو بایستید. وقتی ارقام صفحه‌ی نمایش ثابت شد، ترازو وزن، شاخص توده‌ی بدنی را نشان داده و میله‌ی BMI دور ترازو سطح این شاخص را نمایش می‌دهد.


داده‌ها ذخیره شوند. برای شروع وزن‌کشی بعد از پایان تنظیمات، به آرامی بر روی ترازو فشار وارد کنید. روی ترازو بایستید. وقتی ارقام صفحه‌ی نمایش ثابت شد، ترازو وزن، شاخص توده‌ی بدنی را نشان داده و میله‌ی BMI دور ترازو، سطح این شاخص را نمایش می‌دهد.

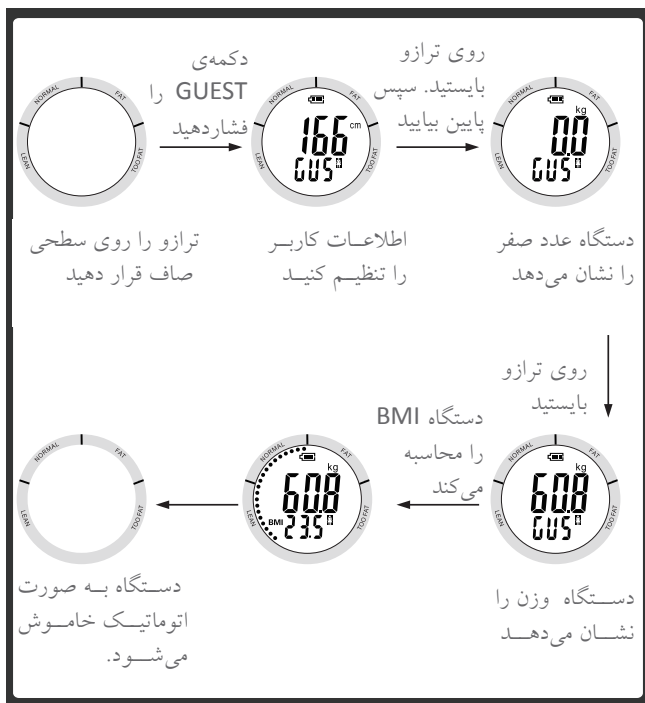

۳) حالت آزمایشی BMI کاربر

الف: در حالت وزن کشی، وقتی صفحه نمایش عدد صفر را نشان می‌دهد. یکی از دکمه‌های ▲ یا ▼ را فشار دهید. ترازو به صورت اتوماتیک کد کاربری را انتخاب می‌کند و وارد حالت سنجش وزن و BMI می‌گردد.

ب. بعد از انتخاب اتوماتیک کاربر ترازو توسط دستگاه، روی ترازو بایستید. صفحه‌ی نمایش نتایج وزن را بعد از ثابت شدن ارقام نشان می‌دهد.

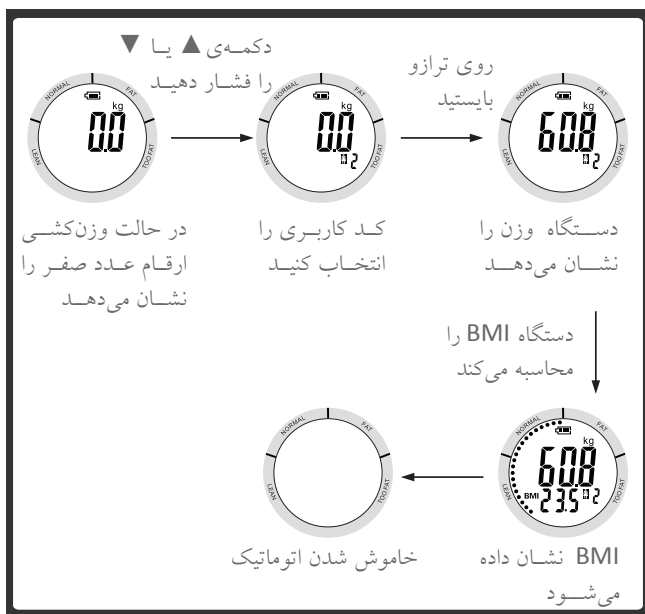

نشانگر بار اضافی

بیش از حداکثر وزن مجاز، روی ترازو قرار گرفته است. حداکثر وزن مجاز روی برچسب زیر دستگاه درج شده است). لطفاً برای جلوگیری از صدمه به دستگاه از ترازو پایین بیاپید.

Err

نشانگر باتری ضعیف

توان باتری ضعیف است. لطفاً باتری نو در دستگاه قرار دهید.

Lo


تست مجدد

اگر هنگام پایین آمدن از ترازو، نشانگر "L" روی صفحه‌ی نمایش ظاهر شد، به این معنا است که وزن‌کشی با ایراد انجام شده است. لطفاً دوباره وزن‌کشی کنید.

L

■ خاموش شدن اتوماتیک

ترازو چند ثانیه پس از وزن‌کشی به صورت اتوماتیک خاموش می‌شود.

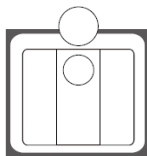

■ اطلاعاتی درباره‌ی شاخص توده بدنی (BMI)

شاخص توده‌ی بدنی (Body Mass Index) با سنجش وزن و قد فرد اندازه‌گیری می‌شود و سنجشی مورد قبول برای تناسب اندام افراد است. شاخص بین ۲۰-۲۵ ایده‌آل محسوب می‌گردد. کمتر از ۲۰ نشانده‌ی آن است که فرد بسیار لاغر است و شاخص بالای ۲۵ نشانگر اضافه وزن آن فرد است (این شاخص فقط به عنوان مرجع تشخیص چاقی یا لاغری فرد است).



■ توصیه‌هایی برای استفاده و نگهداری

۱. سطح دستگاه در صورت مرطوب بودن، لیز خواهد بود. همیشه آن را خشک نگه‌دارید! دستگاه را در فضایی خنک و خشک نگهدار کنید.
۲. بدون حرکت روی ترازو بایستید. به ترازو ضربه وارد نکنید. آن را تکان ندهید و پرتاب نکنید.
۳. با مراقبت ترازو را مورد استفاده قرار دهید زیرا این دستگاه

■ خاموش شدن اتوماتیک

۱. حسّاس و ظریف است. همیشه دستگاه را به حالت افق قرار دهید.
۲. ترازو را با دستمالی مرطوب تمیز کنید و از ریختن آب بر روی ترازو پرهیز کنید. از مواد تمیزکننده‌ی ساینده یا شیمیایی استفاده نکنید.
۳. اگر موفق نشدید دستگاه را روشن کنید، مطمئن شوید که دستگاه، باتری دارد یا توان باتری ضعیف نیست. اگر باتری مستعمل است، باتری نو در دستگاه قرار دهید.
۴. اگر ایرادی روی صفحه‌ی نمایش وجود دارد یا دستگاه پس از مدتی طولانی خاموش نشد، باتری را به مدت ۳ ثانیه از دستگاه جدا کنید. سپس دوباره آن را در دستگاه قرار دهید تا پارازیت‌های روی صفحه از بین برود. اگر نتوانستید این مشکل را حل کنید، لطفاً با خدمات پس از فروش فلر تماس بگیرید.
۵. از این دستگاه استفاده‌ی صنعتی نکنید.