



ترازوی بلوتوثی
مخصوص نوزادان

PSB 250 i

کاربران عزیز

از شما بابت خرید ترازوی هوشمند کودکان سپاسگزاریم. ، این ترازو بهترین همراه رشد کودک شماست! این دفترچه را بخوانید و برای استفاده بهتر از ترازو نزد خود نگه دارید.

■ درباره ترازو

این ترازو مراقبت جامع کودک است که میتواند ۳ فاکتور وزن، قد و اندازه سر نوزاد را در طول دو سال ابتدایی عمرش ثبت کند. با استفاده از این نرم افزار ما که طراحی پیچیده ای دارد، میتوان نمودار رشد نوزاد در مقایسه با استانداردهای سازمان بهداشت جهانی مشاهده نمود. همچنین شما میتوانید دفتر ثبت خاطراتتان را همراه با عکسهایی که یادآور خاطرات شاد شما است بنویسید. با این دستگاه میتوانید اطلاعات مربوط به حداکثر ۸ نوزاد را ثبت کنید.

■ ویژگیها

- گنجایش حداکثر وزن: ۲۵ کیلوگرم/۵۵ پوند میزان تغییر: ۰.۰۰۵kg/۰.۰۱lb
- دامنه سنجش قد: ۴۶~۸۰ سانتی متر / ۱۸.۱~۳۱.۵ اینچ میزان تغییر: ۱ میلی متر / ۰.۱ اینچ
- حافظه: پشتیبانی ۸ کاربر، با علامت مقایسه اطلاعات
- لوازم جانبی: متر سنج نواری برای اندازه گیری دور سر
- نسخه بلوتوث: ۴LE (سازگار با نرم افزار)
- ویژگیهای نرم افزار: صفحه نمایش سنجش، نمودار رشد، ثبت وقایع روزانه و غیره

■ نصب باتری

نصب

تصویر

نصب باتری نیم قلم
لطفاً با توجه به قطب های مثبت و منفی
باتریها را نصب کنید.



۴ عدد باتری نیم قلم ۱.۵ ولتی

توجه: لطفاً از باتریهای مشابه استفاده کنید. اگر از دستگاه به مدت طولانی استفاده نمی کنید لطفاً باتریها را خارج کنید.

صفحه نمایش ال سی دی



عملکرد دکمه ها

ZERO دکمه روشن/خاموش، عملکرد ZERO

HOLD UNIT فشار مختصر دکمه برای نگهداشتن /رها کردن سنجشها، فشار طولانی دکمه برای تغییر واحد اندازه گیری

انتخاب کاربر (کاربران باید قبلا در نرم افزار انتخاب شوند)

روش اندازه گیری وزن و قد



برای اطمینان از درست بودن اندازه گیری، لطفا ترازو را روی سطحی صاف و محکم قرار دهید. قبل از اندازه گیری، کاربر باید توسط نرم افزار ایجاد شود. برای اطلاعات بیشتر، دستورالعمل نرم افزار را ببینید.

- برای روشن کردن دستگاه، دکمه **ZERO** را فشار دهید. صفحه نمایش شماره کاربر قبلی که اطلاعاتش ذخیره شده است را نشان میدهد. برای انتخاب کاربران دیگر میتوانید دکمه **UNIT** را فشار دهید.
- تکیه گاه سیلیکونی را بیرون بکشید و تخته بالاسری را قرار دهید. (به عکسهای ۱ و ۲ نگاه کنید).
- دستگیره بازشونده را در وضعیت عمودی بالا بکشید تا اندازه گیری قد فعال شود و او را به سمت وضعیت قبلی کاملاً خم نگه دارید. صفحه نمایش رقم تنظیم شده ۴۶ سانتی متر / ۱۸،۱ اینچ را نشان میدهد. اگر اینگونه نیست، دکمه **ZERO** را فشار دهید تا مقدار تنظیمی نمایش داده شود. سپس تخته اندازه گیری را تا قد نوزاد بکشید.
- نوزاد را با دقت روی ترازو بگذارید. سر نوزاد باید تخته بالا سری و همزمان پای نوزاد دستگیره عمودی را لمس کند.

- صفحه نمایش نتایج مربوط به وزن و قد نوزاد را نشان می دهد. وقتی اعداد ثابت شد، برای قفل کردن نتایج و ذخیره اطلاعات و اعداد، دکمه **HOLD UNIT** را فشار دهید. سپس شما مقایسه نتایج مربوط به این اندازه گیری را نسبت به قبلی مشاهده خواهید کرد. همه نتایج چند بار به نمایش می آید تا ترازو به طور اتوماتیک خاموش شود. حالت مهمان فقط اندازه گیری ها را نشان میدهد ولی هیچ اطلاعاتی را در حافظه ترازو ذخیره نمیکند. (برای لغو قفل کردن اطلاعات یا خاموش کردن به صورت اتوماتیک بدون انجام هیچ گونه عملیاتی، دکمه **HOLD UNIT** را فشار دهید).

نکته درباره حافظه ترازو: با این ترازو حداکثر ۸ کاربر و برای هر کدام ۱۵ سابقه را میتوان پشتیبانی

نمود. زمانی که اطلاعات بیش از ۱۵ سابقه باشد آخرین سابقه جایگزین اولین اطلاعات ثبت شده میگردد. در اندازه گیری های چندتایی در هر روز، فقط آخرین اندازه گیری برای هر نفر ذخیره میشود. ۶. نرم افزار اندازه گیره های انجام شده را نشان میدهد. اندازه دور سر توسط نوار متر سنج صورت میگیرد و شما باید قالب اندازه گیری سر در نرم افزار را بکشید تا اطلاعات آن ثبت شود. سپس دکمه ی Save را فشار دهید تا همه اندازه گیریها ذخیره شود و برای مرجع نموداری رشد نوزاد ثبت شود. • توجه: اگر بخواهید فقط اندازه گیری انجام دهید، مراحل ۲ و ۳ را انجام ندهید.

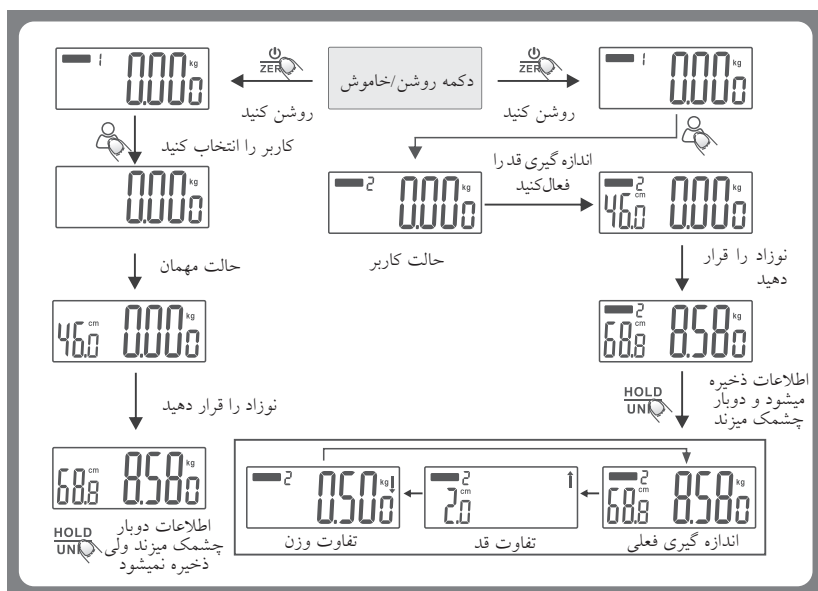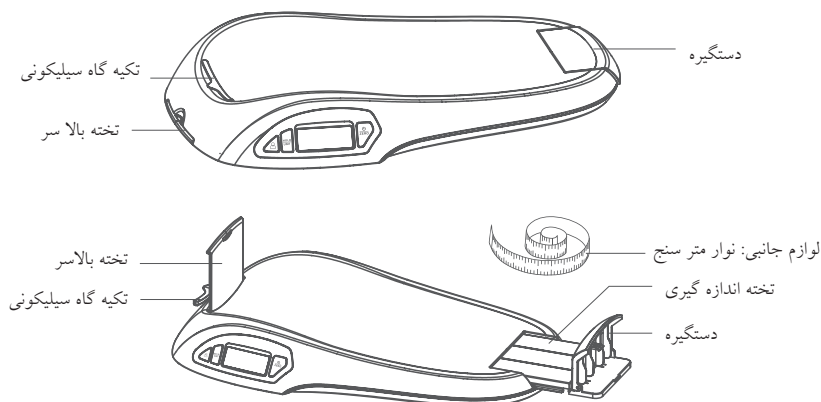

■ روش اندازه گیری اندازه دور سر

بگذارید نوزاد راحت بنشیند، سپس از لوازم جانبی ما که نوار مترسنج است استفاده کنید تا بتوانید با پیچیدن آن دور سر نوزاد از قسمت بالای ابرو تا استخوان پشت سر را از اندازه گیری نمایید.

■ خاموش شدن اتوماتیک و دستی

برای افزایش عمر باتری، ترازو بعد از ۱ دقیقه بدون هیچ عملکردی به طور اتوماتیک خاموش میشود یا برای خاموش کردن دستی دکمه $\frac{\text{ON}}{\text{ZERO}}$ را فشار دهید و کمی نگه دارید تا ترازو خاموش شود.

■ نمایش علائم

نشانه‌های هشداردهنده	نام	دستورالعملها و روشها
Err	بار اضافی	بیش از حداکثر وزن مجاز، بار روی ترازو قرا دارد (وزن مجاز روی ترازو درج شده است) برای صدمه ندیدن ترازو به آرامی نوزاد را بردارید
Lo	باتری ضعیف	باتری ضعیف شده است. با باتری نو تعویض کنید

■ تمیزکاری و مراقبت

۱. ترازو را با دستمالی نم‌دار تمیز کنید. ترازو را در آب یا هر مایع دیگر فرو نبرید و از مواد تمیزکننده ساینده یا شیمیایی استفاده نکنید.
۲. همیشه از ترازو روی سطوح صاف و محکم استفاده کنید.
۳. به ترازو ضربه یا فشار وارد نکنید و آن را نیاندازید.
۴. این دستگاه وسیله ای دقیق و حساس است. لطفاً مراقب باشید.
۵. آن را در سطحی خشک و خنک نگه دارید.
۶. اگر دستگاه روشن نمیشود، باتری آن را بازبینی کنید.
۷. این دستگاه برای استفاده خانگی است. از آن استفاده تجاری یا صنعتی نکنید.

■ راهنمای سریع استفاده از نرم افزار

روش گرفتن نرم افزار

الف. در "اپ استور" یا "گوگل پلی" عبارت **MATHEO Baby Scale** را جستجو کنید و نرم افزار را دانلود کنید.

ب. برای راحت تر بودن، کد QR در طرف راست را اسکن کنید تا بتوانید نرم افزار را بگیرید.



تنظیمات بلوتوث

الف. قبل از استفاده از ترازو مطمئن شوید که بلوتوث دستگاه روشن است.
ب. اگر فعال نیست، به منوی "Settings<Bluetooth>" بروید و آن را روشن کنید.
پ. صفحه روی ترازو را فشار دهید تا روشن شود.

۳. نرم افزار را باز کنید و کاربر را ایجاد کنید.

نرم افزار را باز کنید و همزمان ترازو را روشن کنید، سپس پروفایل را باز کنید و برای ورود به صفحه اندازه گیری آن را ذخیره کنید.

۴. استفاده از ترازو با نرم افزار

الف. اندازه گیری: اطلاعات اندازه گیری را نشان میدهد.
ب. نوار سبز در سمت راست یا چپ را بکشید تا اندازه دور سر اندازه گیری شود.
پ. برای ذخیره اندازه گیریهای ثابت شده روی صفحه دکمه **Save** را فشار دهید.
ت. برای آگاهی از وضعیت سلامتی نوزاد، به قسمت نمودار رشد نوزاد (Child Growing Curve) بروید.
ث. برای مرور اطلاعات قبلی به صفحه سوابق (history) بروید.
ج. برای یادآوری خاطرات شاد گذشته، اطلاعات را در دفترچه خاطرات یادداشت کنید.
برای اطلاعات بیشتر از نرم افزار، به دستورالعمل نرم افزار مراجعه کنید.

توصیه های مهم

نیازهای ضروری روی دستگاه تلفن همراه هوشمند:
بلوتوث نسخه ۴ یا بالاتر
سیستم اپل: آیفون ۴ اس یا بالاتر، iOS ۷ یا بالاتر
سیستم آندروید: آندروید ۴,۳ یا بالاتر

■ سؤالات متداول

نرم افزار نمیتواند اطلاعات را از ترازو دریافت کند

- مطمئن شوید که تصویر بلوتوث روی صفحه وزن کشی ترازو روشن است.
- از روشن بودن ترازو و دامنه صحیح سیگنال امواج اطمینان حاصل کنید.
- اگر باتری به میزان کافی قوی نیست، آن را تعویض کنید.
- تعمیرات دستگاه فقط باید توسط مرکز خدمات پس از فروش صورت گیرد.
- نرم افزار را دوباره خاموش و روشن کنید.
- تلفن همراه هوشمند خود را خاموش و اتصال بلوتوث را فعال کنید.

اتصال بلوتوث قطع شد

- مطمئن شوید که فقط یک تلفن همراه به ترازو وصل است.
- مطمئن شوید که نسخه بلوتوث ۴ یا بالاتر است.